

# 인사이드 무선 목 마사지기

Wireless neck massager




**INSIDY**  
Happy Life Happy Home Appliances

## 안전사고를 줄이기 위한 안내

1. 건강 상태 또는 마사지할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 치료기 또는 의약품이 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.  
\* 피부 질환 또는 기타 질환이 있으신 환자분은 담당 의사와 상의 후 사용하십시오.  
\* 임신부의 사용 시 각별한 주의가 필요합니다.
3. 인공관절 등 신체에 이식된 의료기 또는 치료기를 부착 중이신 분은 담당 의사와 상의 후 제품을 사용하십시오.
4. 골다공증 환자의 경우 사용하지 마십시오.
5. 염증, 감염, 타박상 등의 외상이 있는 부위에 마사지를 사용하지 마십시오.
6. 피부가 예민하거나 약하신 분은 사용을 자제하십시오.
7. 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
8. 설명서의 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오.
9. 음주 후 사용하지 마십시오. 10. 어린아이의 사용을 금합니다.
11. 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
12. 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
13. 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
14. 제품 사용 시 반드시 제공된 부품과 함께 사용하십시오.
15. 제품을 임의로 분해 조립 및 수리하지 마십시오.
16. 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
17. 화장실 등과 같은 습한 곳에서 제품을 사용하지 마십시오.
18. 고의로 제품을 분해하거나, 배터리를 분리하지 마시고 배터리가 내장되어있는 제품으로 제품 폐기 시 절대 불에 태우지 마십시오.
19. 본 제품을 귀걸이 혹은 목걸이 등의 액세서리를 제거하고 사용하십시오.
20. 사용 전 충분히 충전을 한 후 사용하십시오.

'인사이드 목 마사지기'를 구입해 주셔서 감사합니다.  
본 사용자 설명서를 충분히 숙지 후 사용하여 주시고,  
찾기 쉬운 곳에 보관하여 주십시오.

## 제품 기능

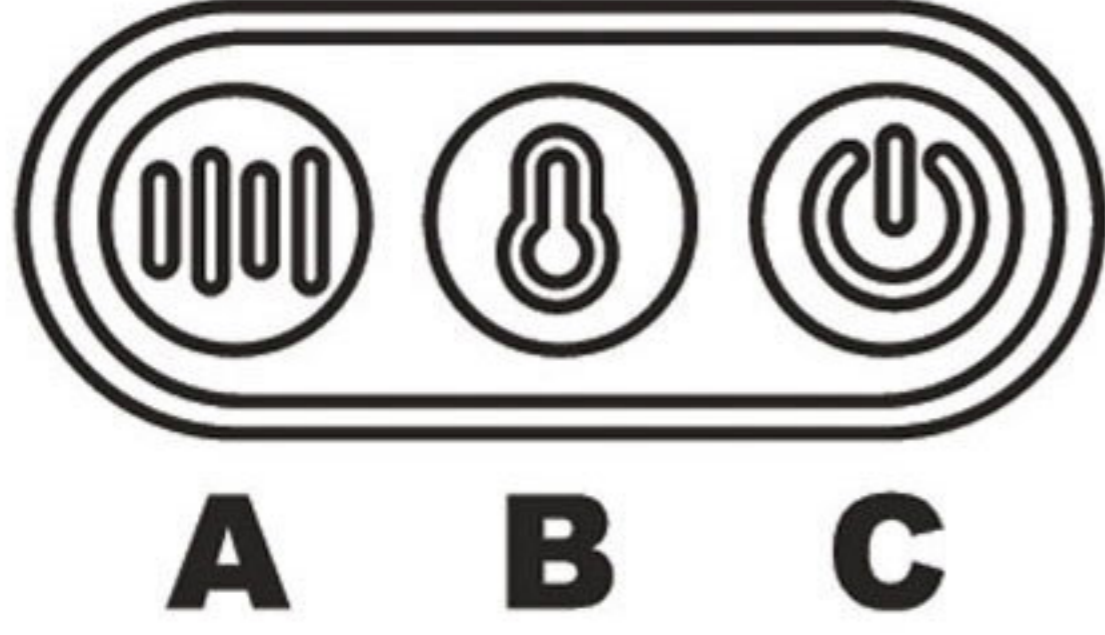

인사이드 마사지기의 메뉴얼 기능을 확인해보세요.

- A. 강도 조절 버튼(3단계)
- B. 온열 버튼(on/off)
- C. 전원 버튼(on/off)

## 사용 방법

1. 제품의 전원 버튼을 약 2초간 길게 눌러주십시오.
2. 제품 작동이 시작되면 주무름 기능과 온열 기능이 동시에 작동합니다.  
온열 버튼을 눌러 온열 기능을 키고 끌 수 있습니다.
3. 제품이 작동중일때, 강도 조절 버튼을 눌러 강도를 조절하십시오.  
약-중-강 3단계로 조절 가능합니다.
4. 제품의 전원 버튼을 약 2초간 눌러 전원을 종료합니다.
5. 충전시간 : 5시간 6. 사용 시간 : 약 2~3시간
7. 충전시 5V 2A 이하 충전기로 충전해 주십시오.

**INSIDY**  
Happy Life Happy Home Appliances